

Información general	
Nombre comercial	Bolsas para recolección de fluidos con solidificante
Marca / Fabricante	FLOVAC / FLOW METER S.p.A.
Referencia	Liner Flovac 1.0 L. con solidificante: 000036015 Liner Flovac 1.5 L. con solidificante: 000036018 Liner Flovac 2.0 L. con solidificante: 000036016 Liner Flovac 3.0 L. con solidificante: 000036017
Registro Sanitario Ecuador	6275-DME-0119
Clasificación del riesgo	I
Método de Esterilización	No Estéril
Presentación Comercial	Caja máster de cartón X 50 unidades (1 blíster X 1 unidad)


Descripción del Producto



CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad: 1000 ml, 1500ml, 2000 ml y 3000 ml.
- Libre de látex.
- Bolsa de polietileno de baja densidad
- Conector "VACUUM": conexión con un acoplamiento cónico "hembra" específico.
- Conector "PACIENTE": Ø 14.0 ÷ 15.5 mm (Ø 8.0-9.2 mm con conector en ángulo recto).
- Conector "TANDEM": Ø 8.0 ÷ 9.2 mm.
- Gránulos absorbentes de poliacrilato de sodio, no irritante y no sensibilizante en contacto con la piel.
- Protección antirreflujo: a través de un sistema de nervaduras verticales deformables no elásticas con una forma cónica.
- Valor de flujo máximo: 42 L/min a -750 mbar (-570 mm Hg).
- Dos sistemas principales Anti-rebosamiento:

1. **Válvula mecánica.** - válvula flotante que detiene la succión cuando el fluido alcanza el nivel máximo de recolección.
2. **Filtro hidrofóbico.** - filtro hidrofóbico que para la acción de vacío cuando el fluido aspirado lo moja

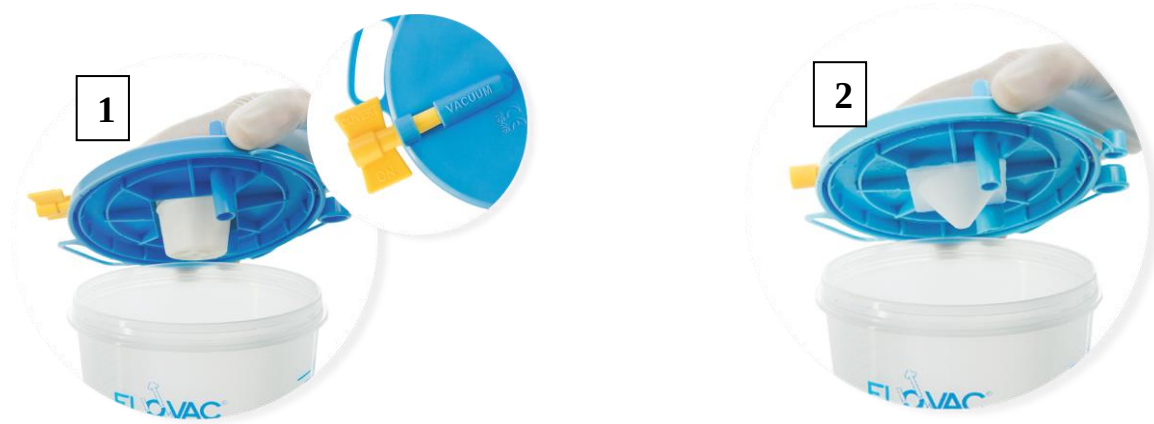

Uso Previsto y Descripción Funcional

Se utiliza para la recolección de fluidos biológicos recolectados por succión y se han diseñado y fabricado para "aplicaciones de alto flujo y alto vacío".

Posee un "kit de solidificante", formado por gránulos gelificantes contenidos en una bolsa sellada soluble en agua que transforma los líquidos aspirados en una masa gelatinosa, para limitar el riesgo de derramar sustancias biológicamente contaminantes.