


Información general	
Nombre comercial	Sondas Nasoyeyunal para nutrición + Guía + Peso
Marca / Fabricante	NUTRICAIR™ / CAIR LGL
Referencia	NCE3..G
Registro Sanitario Ecuador	10199-DME-1020
Clasificación del riesgo	II
Método de Esterilización	OXIDO DE ETILENO
Presentación Comercial	Caja master x 80, 160, 320 unidades (caja interna x 20 unidades)

Descripción del Producto

1. Conector macho ENFit en ABS con cubierta hembra ENFit en Polipropileno y enlace en Poliuretano termoplástico (color depende de la medida "Fr.")
2. Tubo en Poliuretano radiopaco con tira transparente, L= 130 cm
3. Peso en tungsteno con conector Poliuretano
4. Estilete lubricado de acero inoxidable con punta atraumática (poliamida), L= 130 cm, ENFit punta hembra en PVC y ENFit punta macho en ABS

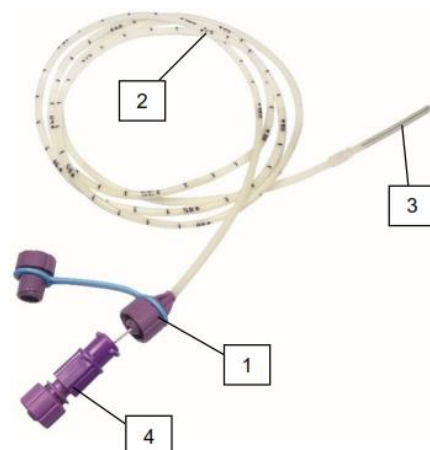

CARACTERISTICAS:

- Guía para ser usadas con Sondas Nutricair™ con ENFit
- Lubricante: Silicón
- 2 ojos laterales
- Marca de centímetros desde 25 a 105 cm
- Tubo de alimentación con punta distal con bolo de peso
- Duración aconsejada del uso: son adecuadas para la población adulta, para un tiempo recomendado de 29 días como máximo.
- Libre de látex

Referencia	Fr/Ch	Color	Ø EXT.	Ø INT.	Ø GUIA	Peso
NCE306G	06	Verde claro	2 mm	1,3	0,8 mm	2,8 g
NCE308G	08	Azul	2,6 mm	1,6 mm	0,8 mm	2,8 g
NCE310G	10	Gris	3,3 mm	2,2 mm	0,8 mm	4 g
NCE312G	12	Blanco	4 mm	2,6 mm	0,8 mm	4 g
NCE314G	14	Verde oscuro	4,6 mm	3 mm	0,8 mm	4,7 g

Uso Previsto y Descripción Funcional

Están destinadas a la hidratación, alimentación y/o administración de fármacos por vía enteral, a corto o medio plazo.

ALMACENAMIENTO

El dispositivo debe almacenarse en su embalaje original, en una zona limpia, seca, protegida de la luz y con una temperatura comprendida entre +5 y +40 °C.

ELIMINACIÓN

Eliminación en un contenedor especializado consistente en residuos contaminados para su incineración.

CONTRAINDICACIONES:

- Estas sondas no se pueden usar para realizar una aspiración gástrica. Para ello, hay que usar sondas específicas de tipo Salem.
- No administrar fármacos que contengan glicerina.